

BIOS living

# Living<sup>2</sup> Lift Chair

---

## LF900



Use and care manual

# Dear Customer

Thank you for purchasing LF900 recliner chair. Please read this book carefully before using armchair.

## SUMMARY

Safety Precautions.....	03
Product Installation.....	05
Moving Product.....	07
Grounding Instructions.....	07
Product Characteristics.....	08
Remote Control Use.....	09
Troubleshooting.....	10



# Safety Precautions

Some precautions must be taken when using LF900 recliner chair in order to avoid any risk of injury. Please read carefully the followings instructions carefully.

 **DANGER:** To reduce the risk of electrical shock:

- Always unplug this product immediately after using and before cleaning.

 **WARNING:** To reduce the risk of burns, fire, electric, shock or injury to persons:

- Do not put hands or fingers near the mechanisms
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Ensure that the chair is connected to a proper electric installation.
- Always unplug the chair after use and before cleaning.
- Do not use the chair in a humid room.
- Do not expose the chair to direct sun light.
- In case of blackout, please turn power switch OFF in order to avoid any damage to the product when power returns.
- Never plug or unplug the chair with wet hands.
- Close supervision is required when the chair is used by children, invalids or disabled persons.
- No more than one person should use the recliner chair at the same time.
- Use the chair only for the functions explained in this manual and do not use accessories not supplied by the manufacturer.
- Do not try to stand up on chair's seat or arm because you could damage product or have an accident.
- Do not sit on the remote control.
- Avoid falling asleep while using the recliner chair.
- Always keep the chair cleaned and never insert objects into gaps.
- Do not move the chair by pulling power cord.
- Do not pull on the AC lead.
- Ensure that no one, no object or pet is under the chair before reclining it.
- This product is designed for household use only.
- Make sure that upholstery is in good condition before using the chair.
- When using this product after it as been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- Do not use the chair in a room where aerosol are sprayed and where oxygen is dispensed.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Do not attempt to repair this product yourself.**

This product is designed for home use. Commercial use will void warranty.



### Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.


**Note:** Our firm has the right to re-design and improve the product. Should you encounter some differences, we apologize as the product could be different from that in your manual.

# Installation


---

**Note :** Do not use sharp or pointed objects to remove chair's packaging. Such tools can damage the upholstery of the product.

**Step 1 :** Make sure there is at least 13cm of free space behind the backrest in raised position and 63cm in front of the leg rest in folded position when arranging the armchair.

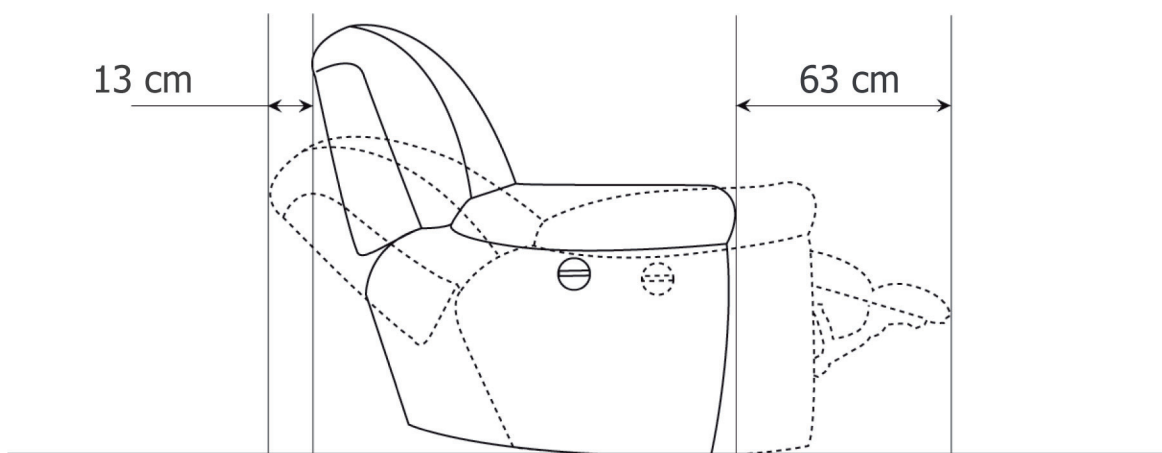


**Step 2 :** Make sure the backrest reclining system is in raised position, then insert left and right flat head bolts of seat (d) into left and right backrest's brackets (c).

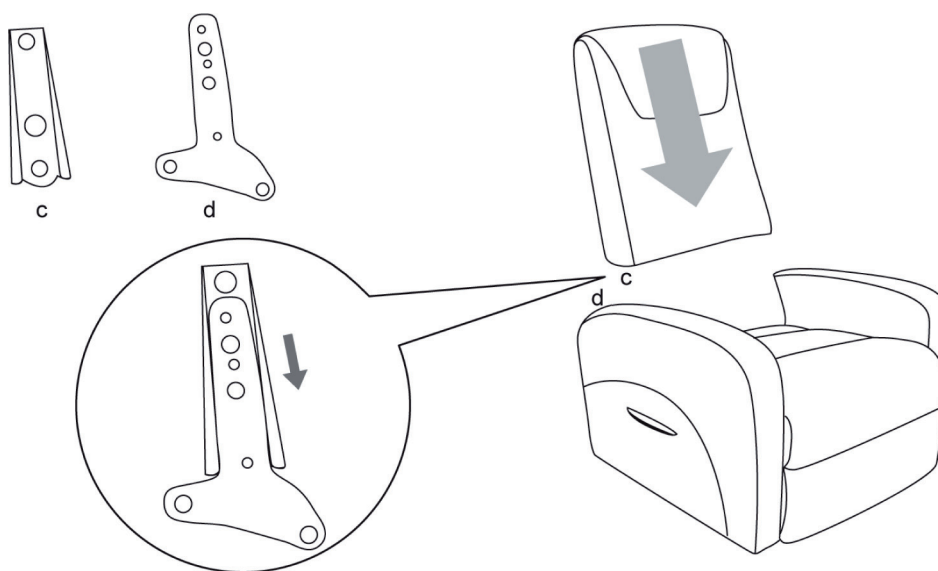


### Step 3 : Power cord connection

- Connect the three electric cords as shown in the diagram below (A & B)

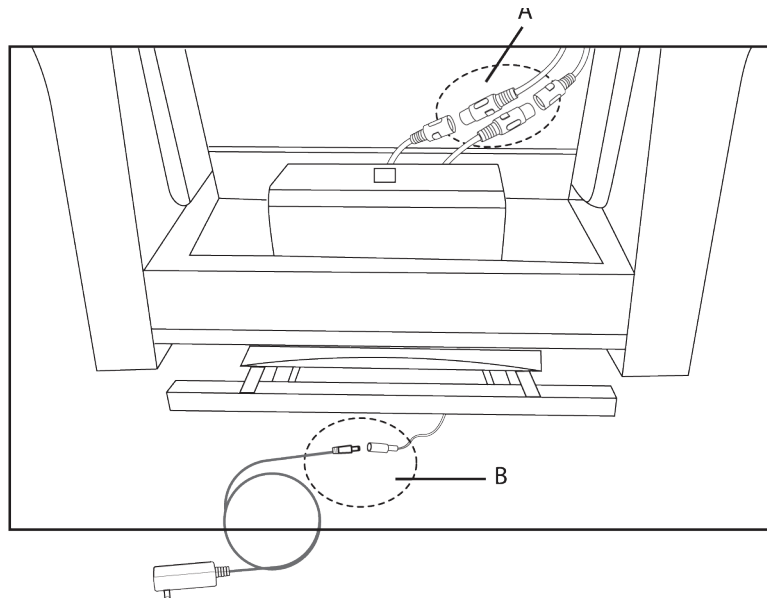



- It is strongly suggest you put two 9 V (DC) batteries into the compartment located under armchair's seat. This allows user to use reclining system in case of a blackout. (Batteries NOT included)

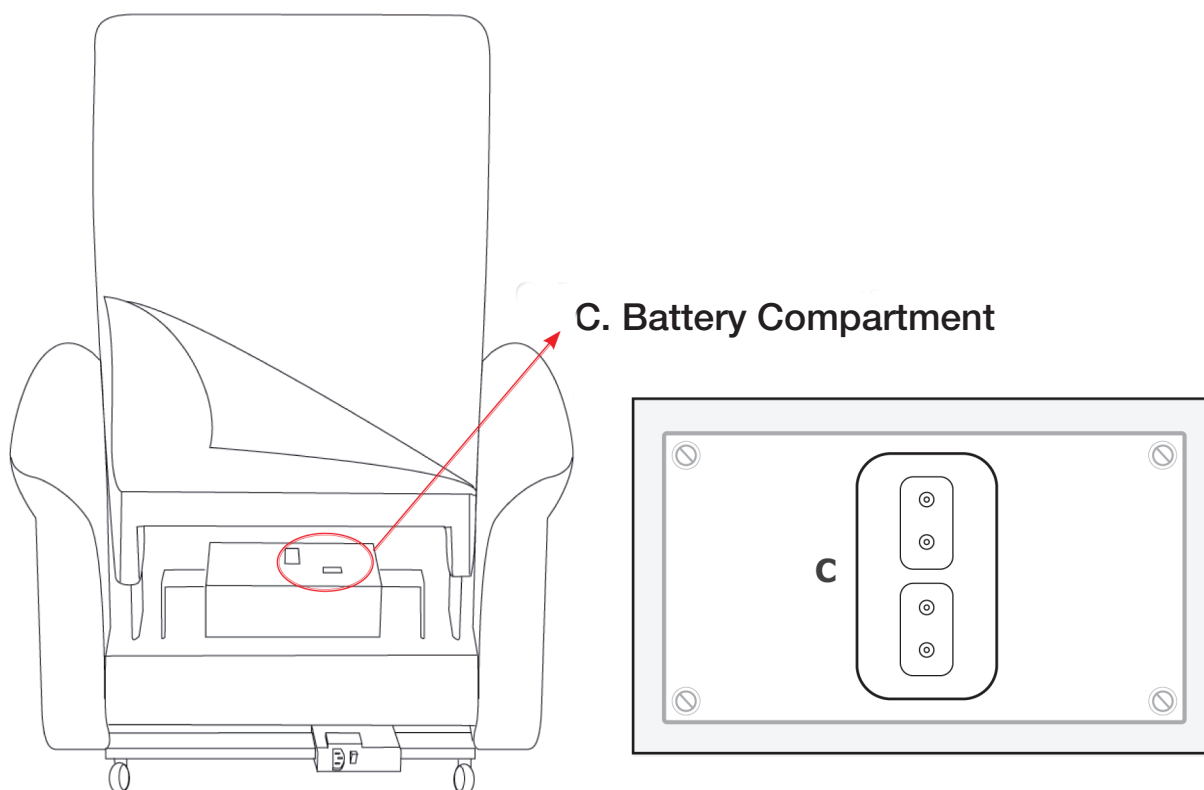

# Moving

Raise up the front part of the chair by holding side panels and use the wheels located on rear part of chair's base in order to move recliner chair.

**Note:** Do not hold armrests to move the chair. Do not drag or push the chair on fragile surfaces.

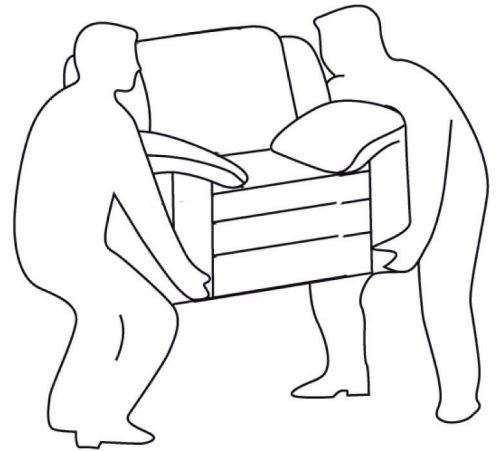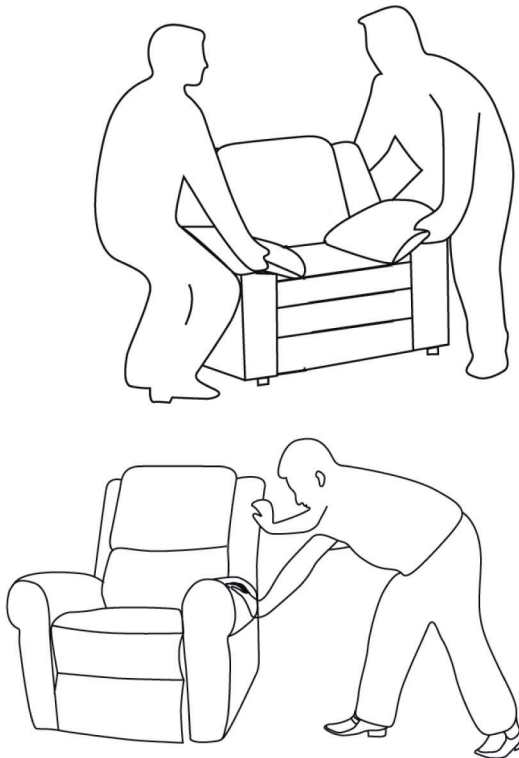


## Grounding instructions

Insert power plug into an appropriate outlet.

Make sure that electrical installation is regular in order to avoid any electrical shock. If not, please contact a qualified electrician.

# Product Characteristics


Information also available on the information tag on armchair's main frame.

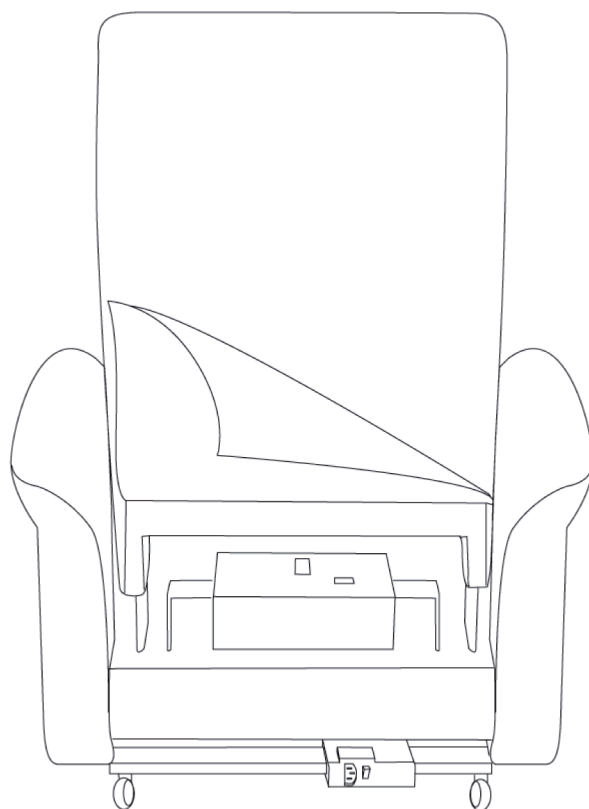

<b>Model No :</b>	<b>ES-8231</b>
<b>Weight :</b>	<b>54 kg</b>
<b>Voltage :</b>	<b>120 V</b>
<b>Frequency :</b>	<b>60 Hz</b>
<b>Input :</b>	<b>24V 3A</b>
<b>Power Consumption :</b>	<b>72 W</b>
<b>Certification :</b>	<b>UL</b>



# Remote Control Use

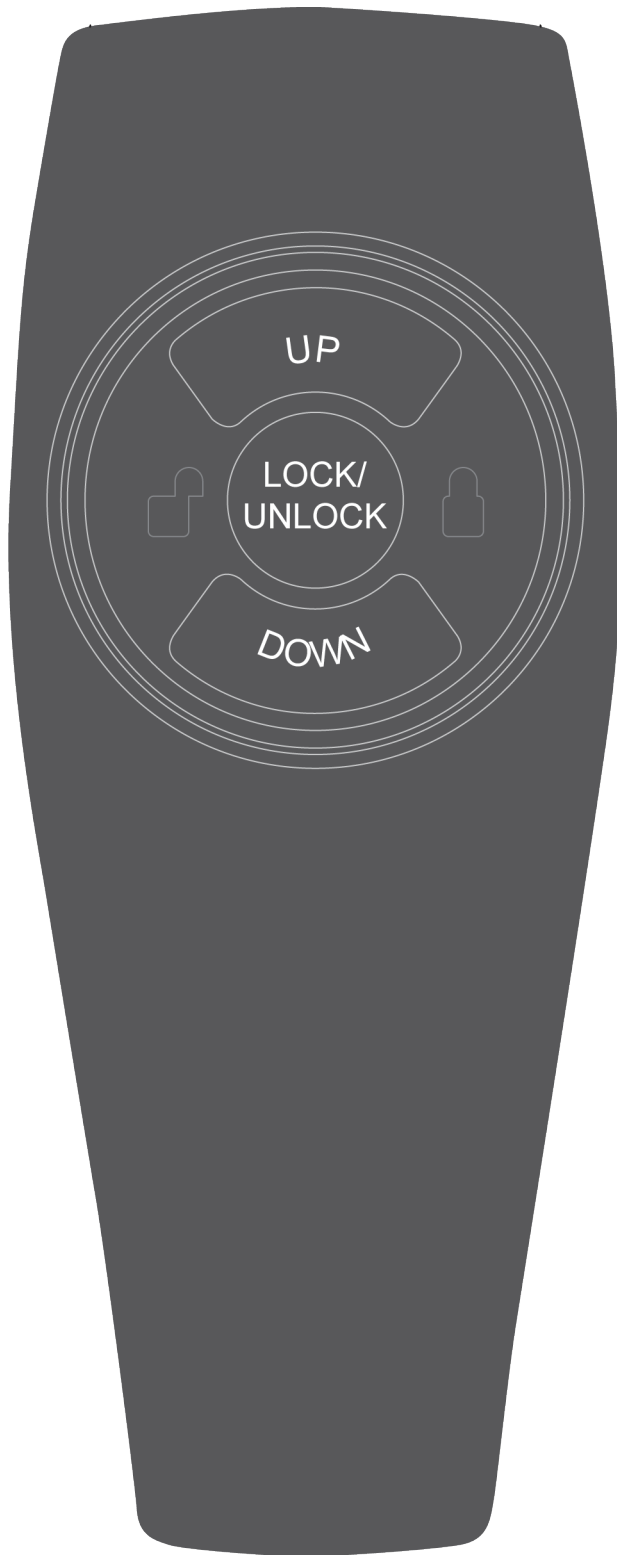

## 1. UP

Press and hold this button to raise up backrest and recline leg rest. When backrest is already in vertical position, use this button to lift up chair's seat. Release this button when you have reached to desired position.

## 2. LOCK/UNLOCK

Press this button to lock your position selection in place. Press it again to unlock armchair and regain control.

## 3. DOWN

Press and hold this button to raise up leg rest and recline backrest. When seat is in upper position, then use this button to move seat down.

# Troubleshooting

1. Recliner chair does not work even when power is ON.

**Actions:** Check that power plug is properly connected to power socket.

2. Remote control is ON but chair does not to work.

**Cause:** After a prolonged use, chair can be overheated.

**Solutions:** Please switch OFF the chair and let it cool for 30-50 minutes.

Please contact your retailer if problems persist.

BIOS living

# Fauteuil releveur Living<sup>2</sup>

---

LF900



Mode d'emploi et d'entretien

**Cher Client**

Nous vous remercions d'avoir acheté le fauteuil inclinable ES-8231.  
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce fauteuil.

## **TABLE DES MATIÈRES**

Mesures de sécurité.....	03
Installation du fauteuil.....	05
Déplacement du fauteuil.....	07
Instructions de mise à la terre.....	07
Caractéristiques du fauteuil.....	08
Utilisation de la télécommande.....	09
Dépannage.....	10



# Mesures de sécurité

Certaines mesures devraient être suivies lorsque vous utilisez le fauteuil inclinable ES-8231 afin d'éviter tous risques de blessures. Veuillez lire attentivement les directives suivantes.

 **DANGER** : Pour réduire le risque de choc électrique :  
Toujours débrancher ce produit immédiatement de la prise de courant après l'avoir utilisé ou avant de le nettoyer.


 **MISE EN GARDE** : Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de chocs électriques ou de blessures aux personnes :

- Ne pas mettre les mains ou les doigts près du mécanisme
- Si le fil électrique est endommagé, il devrait être remplacé par le fabricant ou un intermédiaire de service ou une personne qualifiée similaire en vue d'éviter un danger.
- Vous assurer que le fauteuil est branché à une installation électrique adéquate.
- Débrancher toujours le fauteuil après l'avoir utilisé ou avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser ce fauteuil dans un endroit humide.
- Ne pas exposer ce fauteuil à la lumière solaire directe.
- En cas de panne de courant, veuillez mettre le fauteuil hors tension afin d'éviter tous dommages au produit lorsque l'alimentation électrique reviendra.
- Ne jamais brancher ou débrancher le cordon avec les mains mouillées.
- Une supervision étroite est nécessaire quand ce fauteuil est utilisé par les enfants ou des personnes handicapées.
- Pas plus d'une personne ne doit utiliser ce fauteuil inclinable en même temps.
- Utiliser ce fauteuil seulement d'après les fonctions expliquées dans ce mode d'emploi et ne pas utiliser des accessoires autres que ceux fournis par le fabricant.
- Ne jamais tenter de se tenir debout sur le siège du fauteuil ou les appuie-bras car vous pourriez endommager le fauteuil ou même vous blesser.
- Ne pas vous asseoir sur la télécommande.
- Éviter de vous endormir lorsque vous utilisez le fauteuil inclinable.
- Maintenir en tout temps ce fauteuil propre et ne jamais insérer d'objets dans les interstices.
- Ne jamais déplacer ce fauteuil en tirant sur le cordon électrique.
- Ne jamais tirer sur la broche de raccordement c.a.
- Vous assurer que ni personne ni objet ni animal domestique ne se trouve sous la chaise avant d'incliner le dossier.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement.
- Vous assurer que le revêtement est en bon état avant d'utiliser ce produit.
- Lorsque vous utilisez ce produit après l'avoir entreposé, vérifier si le produit fonctionne adéquatement avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser ce fauteuil dans un endroit où des aérosols ont été vaporisés et où l'on donne de l'oxygène.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

**N'essayez pas de réparer vous-même ce produit.**

Ce produit est conçu pour une utilisation à domicile. L'usage commercial annulera la garantie.

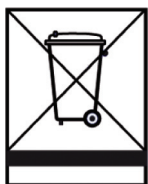

### Procédure d'élimination adéquate pour ce produit


Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être disposé avec les autres déchets domestiques. Pour prévenir des dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine à partir d'une élimination incontrôlée des déchets, recycler ce produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre fauteuil usé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter le vendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit en vue de le recycler en respectant l'environnement.

**Note:** Notre compagnie se réserve le droit de modifier et d'améliorer le produit ; dans le cas où vous rencontreriez quelques modifications, nous nous en excusons car le produit peut être différent de celui présenté dans votre mode d'emploi.


# Installation du fauteuil

**Note :** Ne pas utiliser d'objets aiguisés ou pointus pour retirer l'emballage du fauteuil. Ces outils peuvent endommager le tissu d'ameublement de ce produit.

**Étape 1 :** Vous assurer qu'il y a au moins un espace de 13 cm derrière le dossier (en position relevée) et au moins un espace de 63 cm en avant du repose-jambes (en position rabattue) et que ces espaces sont libres de tous obstacles lorsque vous positionnez le fauteuil.

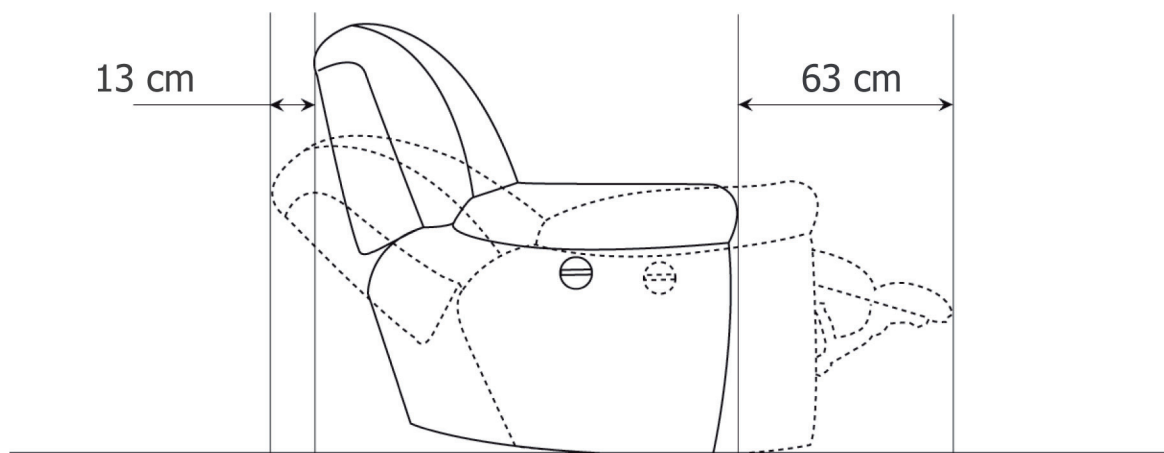


**Étape 2 :** Vous assurer que le système d'inclinaison du dossier est en position relevée. Puis insérer les boulons à tête plate (d) à droite et à gauche du siège dans les supports à droite et à gauche (c) du dossier.

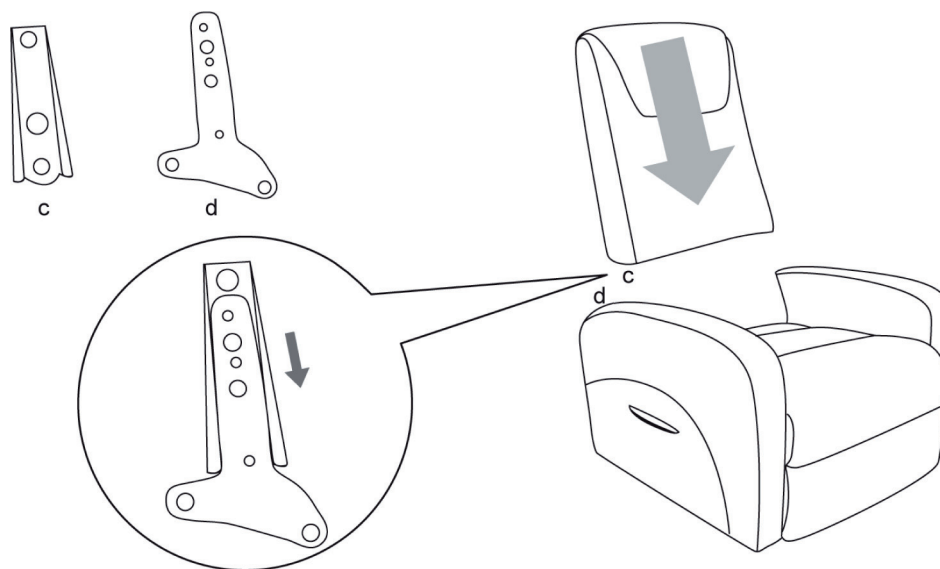


### Étape 3 : Branchement des cordons électriques


- Brancher les trois cordons électriques comme le démontre le diagramme aux points A et B.

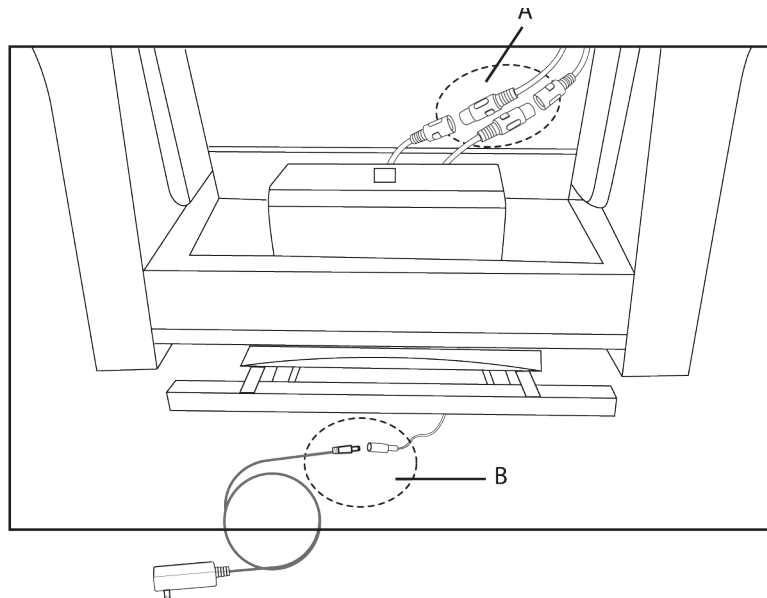

- Nous vous suggérons fortement de mettre en place deux (2) piles de 9V (c.c.) dans le compartiment des piles sous le siège du fauteuil. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser le système d'inclinaison du fauteuil en cas de panne de courant. (Les piles NE SONT PAS comprises).

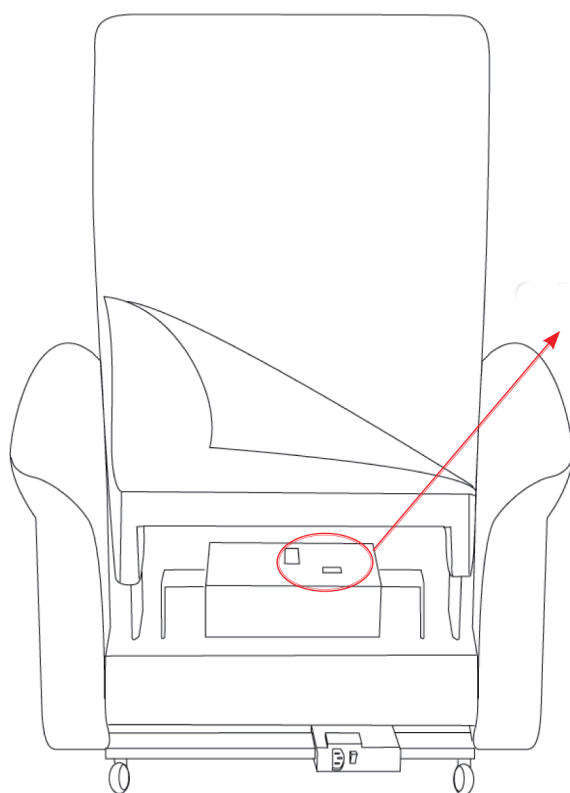

C. Compartiment des piles

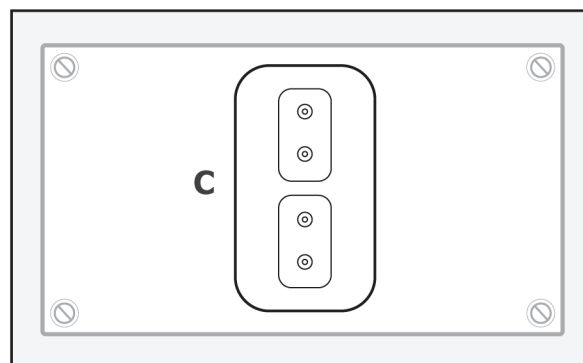




# Déplacement du fauteuil

Relever la partie frontale du fauteuil en tenant les panneaux latéraux et utiliser les roues situées à la partie arrière de la base du fauteuil pour le déplacer.

**Note:** Ne pas tenir les appuie-bras pour déplacer le fauteuil. Ne pas tirer ou pousser le fauteuil sur des surfaces délicates.

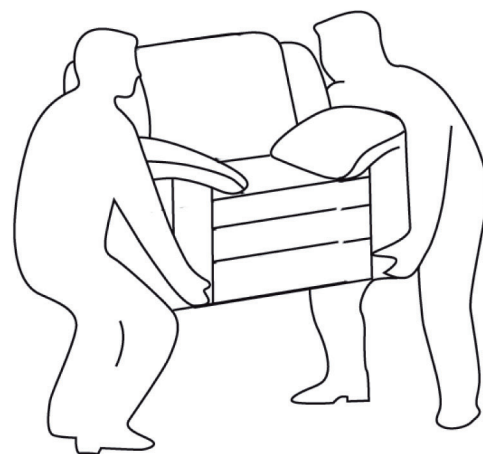


## Instructions de mise à la terre

Brancher la prise électrique dans une prise murale adéquate.

Vous assurer que l'installation électrique rencontre les normes d'installation électriques pour éviter tout choc électrique. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter un électricien qualifié.


# Caractéristiques du fauteuil

Vous pouvez aussi trouver les caractéristiques principales du fauteuil sur l'étiquette située sur l'armature.

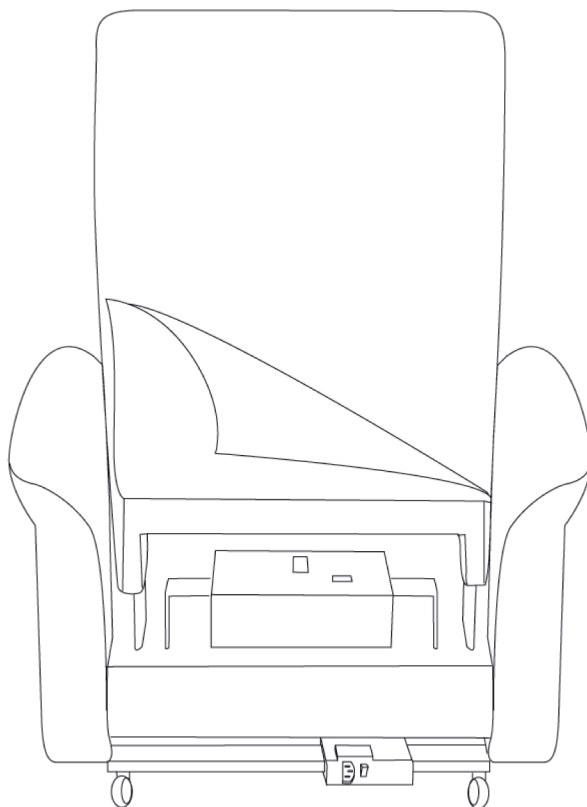

<b>Modèle N° :</b>	<b>ES-8231</b>
<b>Poids :</b>	<b>54 kg</b>
<b>Tension :</b>	<b>120 V</b>
<b>Fréquence :</b>	<b>60 Hz</b>
<b>Puissance :</b>	<b>24V 3A</b>
<b>Consommation électrique :</b>	<b>72 W</b>
<b>Homologation :</b>	<b>UL</b>

# Utilisation de la télécommande

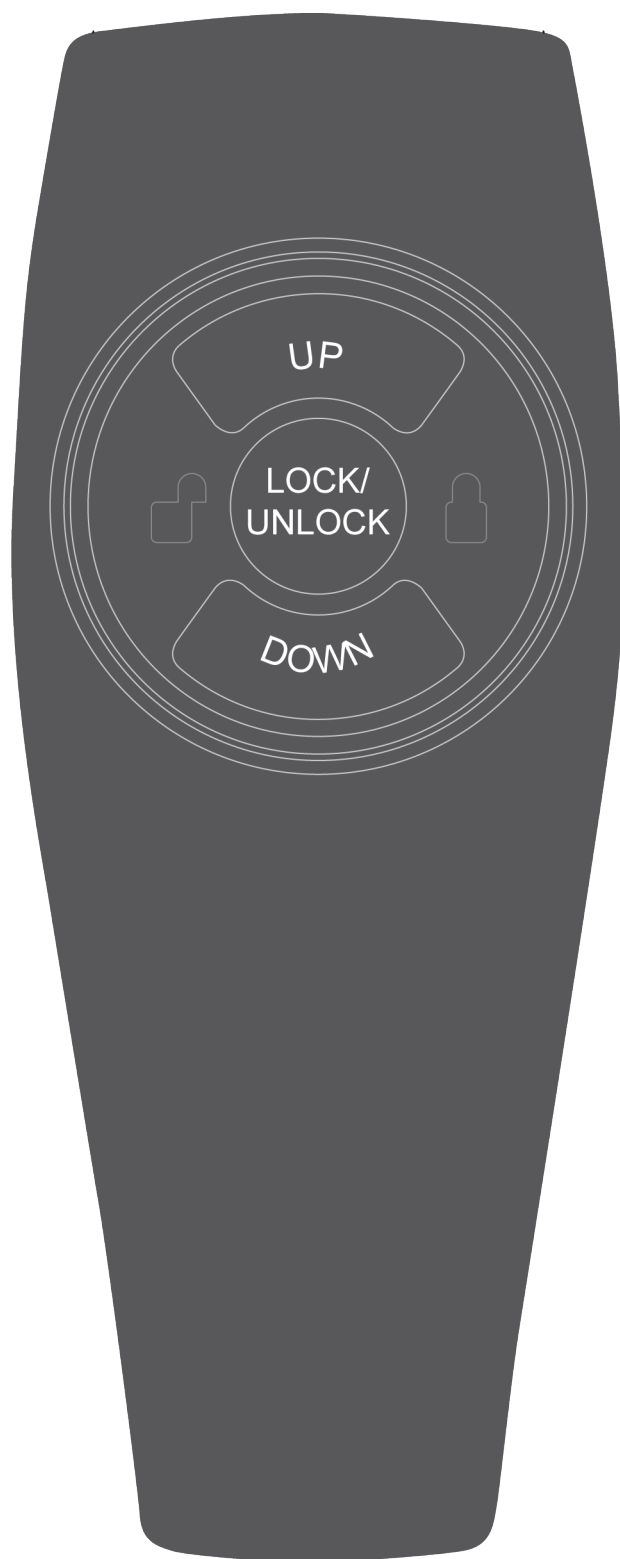

## 1. UP (vers le haut)

Appuyer et tenir enfoncé ce bouton pour relever le dossier et incliner le repose-jambes. Quand le dossier est déjà en position verticale, utiliser ce bouton pour rehausser le siège du fauteuil. Relâcher ce bouton quand vous avez atteint la hauteur désirée.

## 2. LOCK/UNLOCK

(verrouiller/déverrouiller)

Appuyer sur ce bouton pour verrouiller en place la position que vous avez choisie. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour déverrouiller et reprendre le contrôle du fauteuil.

## 3. DOWN (vers le bas)

Appuyer et tenir enfoncé ce bouton pour relever le repose-jambes et incliner le dossier. Quand le siège est en position supérieure, alors utiliser ce bouton pour le baisser.

# Dépannage

1. Le fauteuil de relaxation ne fonctionne pas même si le système est sous tension.

**Solution :** Vérifier si le cordon est branché à la prise de courant électrique.

2. La télécommande est sous tension mais le fauteuil ne fonctionne pas.

**Cause :** Après une utilisation prolongée, le fauteuil peut surchauffer.

**Solution :** Mettre hors tension le fauteuil et laisser le système de fonctionnement se refroidir pendant environ 30 à 50 minutes.

**Veillez contacter votre vendeur si les problèmes persistent.**